

ご使用に際しては、この添付文書、及び取扱説明書を必ずお読み下さい。また、必要な時に読めるように大切に保存して下さい。

2015 年 6 月 1 日作成（第 2 版）＊  
2015 年 3 月 2 日作成（第 1 版）

届出番号:22B1X00006000005

機械器具 80 はり又はきゅう用器具  
一般医療機器 家庭用貼付型接触粒 JMDN コード 71026000

## 再使用禁止


## こりスポットと

### 【禁忌・禁止】

- 再使用禁止

### 【形状・構造及び原理等】

< 各部の名称 >

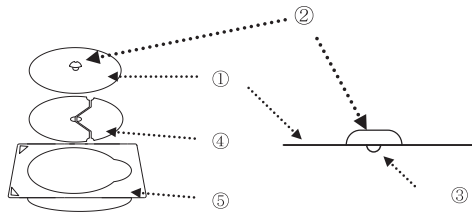


	構造名称
①	テープ
②	固定部
③	接触部
④	台紙
⑤	包装容器(カートリッジ)

### 【使用目的又は効果】

粘着テープの中央にある粒状の接触部を、  
コリの部分に貼付することにより圧迫し「コリの緩解」を目的とする。

### 【使用方法等】

- ・貼る前に、皮膚の脂や汗をよく拭いて下さい。
- ・コリ、痛みのある部分を指等で押し、よく感じる箇所に貼って下さい。

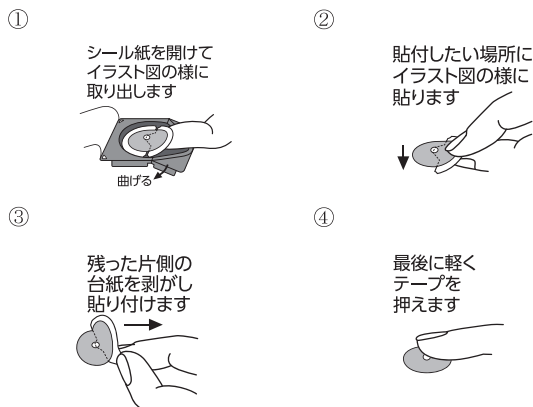

### 【使用上の注意】

- ・次の患者には適用しない事を原則としますが、特に必要な場合には医師に相談し慎重に使用して下さい。  
(妊婦、救急事態もしくは手術を必要とする場合、悪性腫瘍、出血性疾患、接触性皮膚炎、アレルギーのある患者。)  
ご使用にあたっては、機器に異常がないか確認してからご使用して下さい。
- ・貼付時間は24時間以内になる様ご使用下さい。＊
- ・使用中、接触部分が皮膚を傷付ける事があります。  
その際は、剥がした後の傷跡を化膿防止の為に消毒し、掻かないようにして下さい。
- ・固定部は凸部となっていますので、衣類等に引っかからないようにご注意下さい。
- ・固定部へ過度な衝撃を加えますと破損するおそれがありますので  
ご注意下さい。＊  
〔例:貼付した部位が床、壁等に当たる・擦れる等。〕
- ・本品の使用によって皮膚に発疹、発赤、かゆみ等の症状があらわれた場合は使用を中止し、医師又は薬剤師にご相談下さい。  
場合によっては使用中、痛みや疲労感が増す事があります。刺激が強すぎる可能性もありますので、念の為すべて本品を剥がして下さい。  
従前の状態に戻った時は、貼り付ける枚数を少なくし、ご使用下さい。
- ・ご使用後、皮膚に貼り付け跡が残る事がありますが、通常は数日で消えます。
- ・本品を廃棄する場合には、お住まいの区市町村の廃棄方法に従って廃棄して下さい。

### 【保管方法及び有効期間等】

#### < 貯蔵・保管方法 >

- ・水ぬれ、直射日光、高温多湿及び化学物質で汚染される可能性のある場所を避けて保管して下さい。
- ・乳幼児の手の届かないところに保管して下さい。

#### < 製造番号又は製造記号 >

- ・製造番号は外箱に記載

#### < 有効期間・使用の期限 >

- ・使用期限は外箱に記載(自己認証による)

### 【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売業者： セイリン株式会社

住 所： 〒424-0037

静岡県静岡市清水区袖師町 1007-1

お問合せ番号： 054-365-5380

受付時間 9時から17時

(土・日・祝日を除く)

製 造 業 者： セイリン株式会社